

HAEQUEO

MILLESIME

PRAINATTI



FANHBLEY

PRAINATTI



FANHBLEY





MILLESIME

La Ricerca nel Dettaglio

Creato per i sofisti della medicina estetica **HAEQUEO**  
**Millesime** è il Programma studiato per ridisegnare e de-  
finire i tratti estetici con la precisione del dettaglio.



# Espressività Estetica



HAEQUEO Millesime viene concepito per esaltare la creatività e professionalità dei medici più esigenti.

La varietà delle configurazioni che hanno in comune la stessa matrice, ma caratteristiche peculiari diverse, consente l'individualizzazione del trattamento.



# HAEQUEO


MILLESIME

Il Programma Millesime di HAEQUEO si fonda su un innovazione assoluta raggiunta nell'ambito dell'acido ialuronico: FULL SPECTRUM TECHNOLOGY.

# FULL-SPECTRUM TECHNOLOGY

Questa tecnologia consente, grazie ad un complesso e sofisticato processo produttivo, la selezione di un ampio range di pesi molecolari.

Nel programma Millesime la gamma è stata specificatamente modulata per ottimizzare sia le proprietà reologiche del Gel nelle sue differenti funzioni volumizzanti, sia per soddisfare la necessità di naturali interfacce tissutali Bio-Mimetiche in grado di esercitare una compenetrazione nella matrice extra-cellulare, funzionale e rispettosa delle complesse dinamiche della mimica facciale.

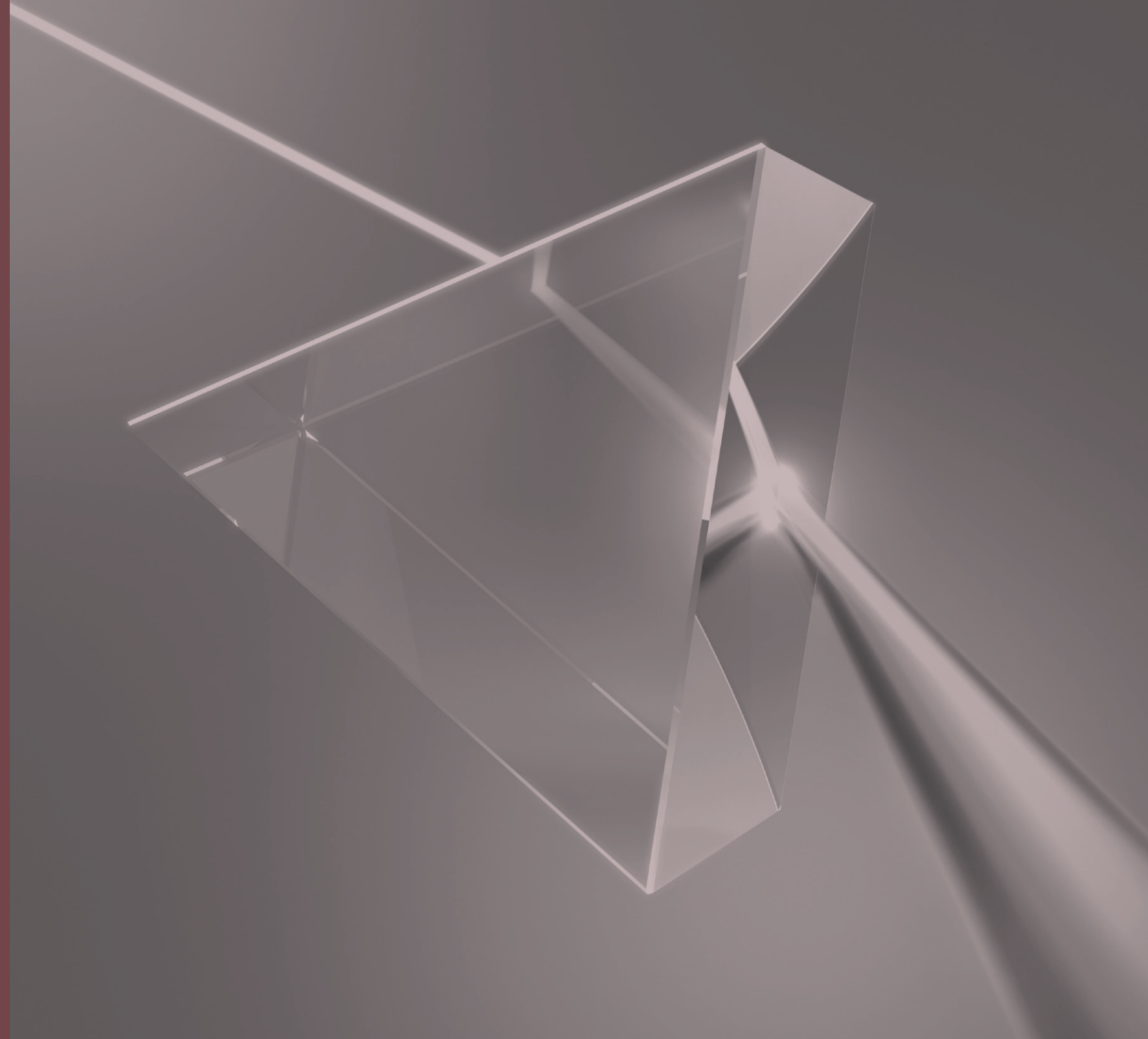


# FULL-SPECTRUM TECHNOLOGY

## Vantaggi e Benefici.


Migliore interfaccia intra-tissutale (interfaccia Bio-Mimetica)

Processo di reticolazione più efficiente


Migliore stabilità

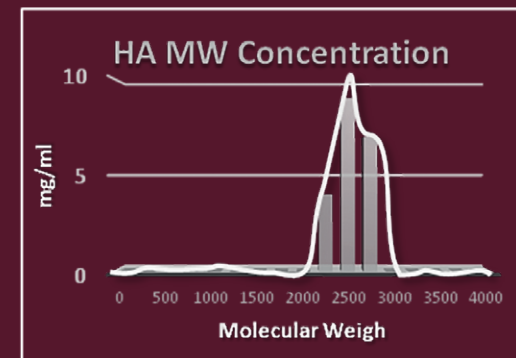

Conventional HA MW Range

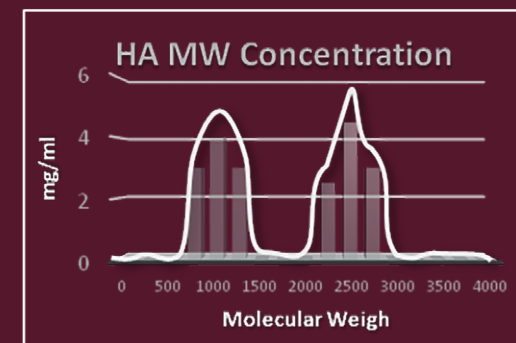

Hybrid HA MW Range

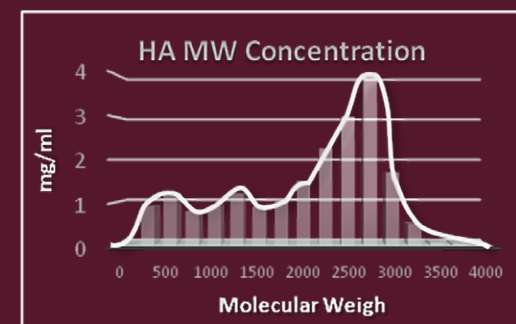

Full Spectrum Technology


## La Tecnica

Lo speciale processo produttivo, specificamente modulato a secondo delle esigenze applicative, consente di ottenere un bio-gel costituito da un range con un ampio spettro di pesi molecolari in grado di soddisfare con maggiore efficacia il complesso processo di reticolazione e migliorare l'integrazione del gel con i tessuti.

Questo procedimento produttivo Brevettato, prevede un processo bio-fermentativo modulato in continuo e senza interruzioni, durante il quale vengono variati e regolati molteplici fattori fra i quali temperatura, pressione e tempo per ottenere un composto finale costituito da un ampio spettro di differenti pesi molecolari.



# Interfaccia Bio-Mimetica

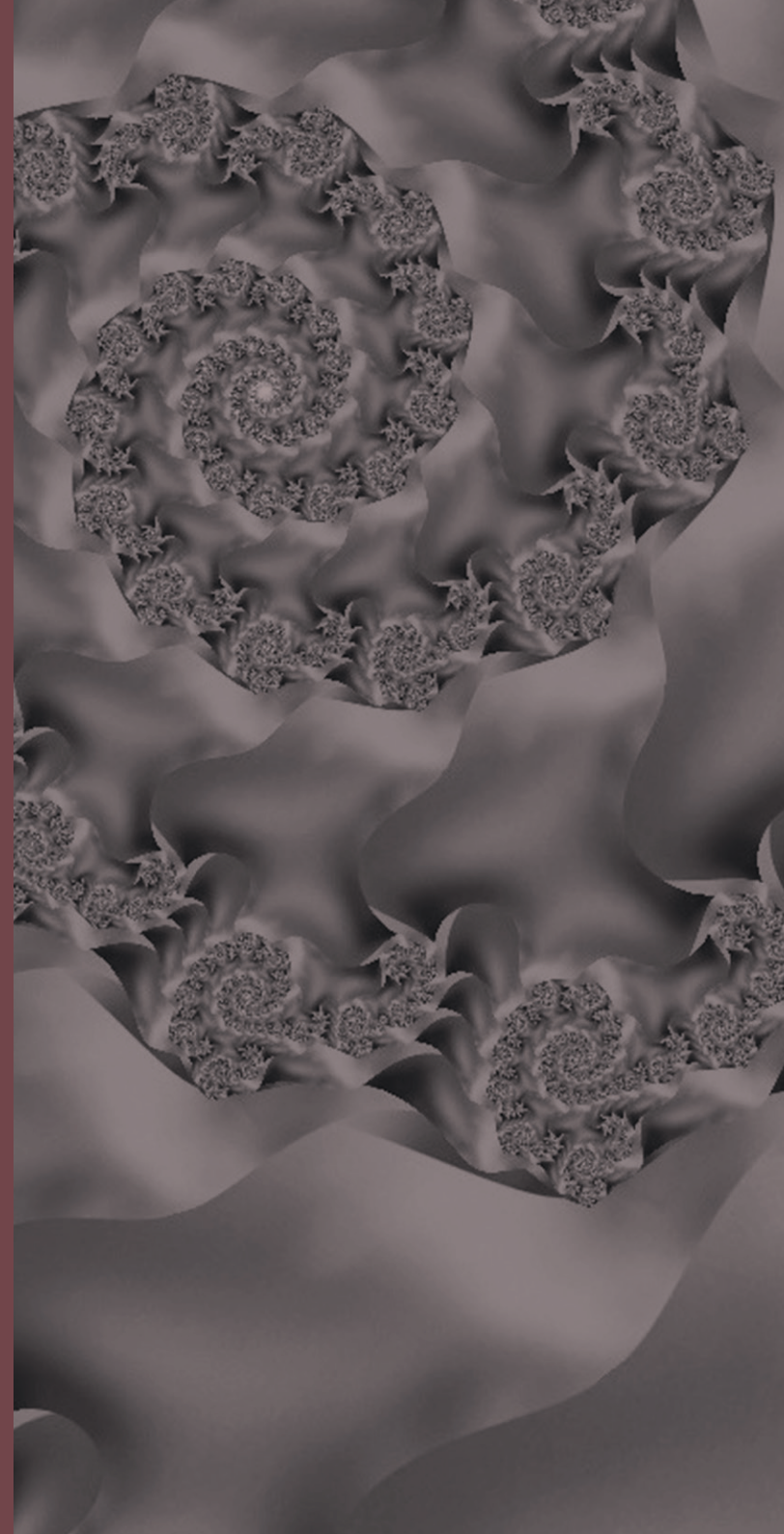

Le peculiari caratteristiche dell'idrogel della linea HAEQUEO Millesime garantiscono un'interfaccia prodotto - tessuto ottimale con l'abbattimento degli effetti infiammatori dovuto agli attriti

Permeanza™

Coesività Espandibile nei Tessuti

La PERMEANZA™, definizione proveniente dalla fisica elettromagnetica ed associata in medicina estetica esclusivamente ad HAEQUEO, è una caratteristica di diffusione intradermica derivante dalle sofisticate tecniche produttive adottate per tutte le configurazioni della gamma HAEQUEO Millesime.



Tali tecniche riguardano sia la tipologia di Acido ialuronico utilizzato, caratterizzato da innovativi frammenti con differenti disposizioni spaziali, che andranno ad attivare, con finalità specifiche, i vari recettori fibroblastici CD 44, sia il particolare tipo di reticolazione impiegato, una sorta di Multi-Reticolazione, che favorisce la diffusione del filler in maniera omogenea negli spazi interstiziali del derma, senza alterare le eccellenti caratteristiche correttive.



# Processo di reticolazione ad Alta Efficienza

L'intera gamma **HAEQUEO Millesime** è realizzata con Acido Ialuronico ad ampio spettro di pesi molecolari. L'**HA prodotto con Full Spectrum Technology** è sottoposto ad un esclusivo ed innovativo procedimento di reticolazione in grado di ridurre la quantità di agenti reticolanti senza perdere la sua efficacia e senza compromettere l'iniettabilità.


Aumentata resistenza all'Enzimolisi.

Più elevata stabilità del Gel Reticolato.

Performance durata aumentate.

Eccellente Bio-compatibilità.

Bassa concentrazione di agente reticolante



La soluzione alcalina di ialuronato di sodio reagisce con l'alcano a catena lunga contenente il gruppo epossidico e l'agente reticolante contenente il gruppo epossidico per 2-5 ore a 35° C.-50° C. per produrre ialuronato di sodio reticolato, quindi lavato, gelificato e sterilizzato, per preparare il gel.

Il gel di ialuronato di sodio così prodotto, senza compromettere l'iniettabilità, risulta essere più resistente all'enzimolisi, più stabile e con un'eccellente biocompatibilità.



HAEQUEO

MILLESIME

Il Programma







HAEQUEO  
MILLESIME

HAEQUEO  
CLASSIC

HAEQUEO  
PRECISION

HAEQUEO  
EXTRA

HAEQUEO  
SUMIA



# HAEQUEO CLASSIC

Armonia Globale



La sua specifica formulazione lo rende versatile a diversi inestetismi mediando un'azione efficace e naturale.

- Contorno Periorale
- Contorno Periorbitale
- Rughe Glabellari
- Contorno Labiale
- Ristrutturazione delle Macro-aree.



# HAEQUEO PRECISION

Performance Mirate



Rappresenta una nuova configurazione di filler disegnato specificatamente per i trattamenti più sofisticati, dove è richiesta una particolare attenzione ai dettagli.

- Rimodellamento Nasale
- Rimodellamento solco Naso-Giugale
- Trattamento dell'area Perioculare
- Palpebra superiore

# HAEQUEO

## EXTRA

Definizione e Naturalezza



Formulazione particolarmente idonea per il trattamento di inestetismi più severi consentendo correzioni decise e armoniche.

- Rughe Facciali Profonde
- Severe Depressioni Cutanee
- Aumento Consistente del Volume Labbra
- Rimodellamento dei Rilievi Facciali
- Ridefinizione dei Contorni Facciali.



# HAEQUEO SUMIA

Volume e Proiezione



Indicato per il trattamento di rimodellamento della morfologia facciale, grazie alle sue proprietà può essere impiegato nella zona sovra-periosteale e come riempitivo nelle aree più profonde.

- Rimodellamento Zigomatico
- Ridefinizione Profilo Mandibolare
- Rimodellamento Zona Mentoniera
- Ristrutturazione Full Face.



# HAEQUEO

## MILLESIME

### Flessibilità

Tutti i prodotti della line HAEQUEO Millesime sono totalmente compatibili fra loro e si possono con sicurezza utilizzare in combinazione a seconda delle esigenze.



### Sicurezza e Affidabilità

I prodotti della Linea HAEQUEO Millesime per la loro Asepsi vengono sottoposti ad uno speciale delicato processo di Sterilizzazione a Vapore Saturo a Bassa Temperatura.

Questo procedimento richiede tempi più lunghi rispetto alle tradizionali tecniche ma garantisce la Totale Sicurezza preservando le peculiari proprietà del gel

PRAINATTI



FANHBLEY

INNATE *SWISS*





